

id - MEDIC[®]

indoor - Gruppe



PRODUKTKATALOG

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZEN | PFLEGE BETT-MATRATZEN | VISKOELASTISCHE-MATRATZEN
POSITIONIERUNGS- UND LAGERUNGSHILFSMITTEL | RÄUMUNGSTUCH

ALLGEMEINE AUFTRAGSANNAHME

KONTAKTAUFNAHME

id - MEDIC[®]

indoor - Gruppe

eine Marke der indoor-gruppe-chemnitz

Weststrasse 86 | 09116 Chemnitz

Telefon: 0371 | 69 46 69 2 | Telefax: 69 46 51 7

www.indoor-gruppe.de | info@indoor-gruppe.de

AUFTRAGSANNAHME

Telefon 0371 / 69 46 69 2

Telefax 0371 / 69 46 51 7

BUCHHALTUNG

Debitoren Telefon 0371 / 69 46 51 6

Kreditoren Telefon 0371 / 69 46 51 6





Inhalt | Produktübersicht

Standard-Komfort Matratzen

id-MED 100-35 Terra NOVA Pflegebett-Matratze
id-MED 100-40 Klinikbett-Matratze nach DIN 597
id-MED 100-50 Wende-Matratze DUO
id-MED 100-70 7-Zonen-Pflegebett-Matratze

Antidekubitus-Matratzen mit viscoelastischem Kaltschaum

id-MED 200-10 Visko
id-MED 200-20 Relief
id-MED 200-50 Cube
id-MED 200-60 Flexi-ADM
id-MED 200-70 Care

Schwerlast- Matratzen

id-MED 300-10 XXL adipös

Orthopädische- Matratzen

id-MED 400-10 ortho Wellensegment
id-MED 400-20 ortho Qudrosegment

Viscoelastische- Matratzenauflagen

id-MED 500-10 viscoauflage medium
id-MED 500-20 viscoauflage medium

Time-out vandalensichere Matratzen

id-MED 600-180 Patja

Sturzprophylaxe

id-MED 700-10 Sturzmatte
id-MED 700-20 Seitengitterpolster

PU-Schutzbezüge

id-MED Trend Plus 2004 Schutzbezug 165 gr
id-MED Trend BI-Stretch 2008 Schutzbezug 220 gr
id-MED Trend Ultra 2009 Schutzbezug 125 gr



Allergie-zwischen-Schutzbezüge

id-MED Trend Somnus Vollschutzbezug
id-MED Trend Somnus Halbschutzbezug
id-MED Trend somnus Kissenschutzbezug
id-MED Trend Somnus Einziehdeckenschutzbezug
id-MED Trend Somnus Reise-Set

Bettwaren

id-MED Kopfkissen
id-MED Einziehdecken

Evakuierungs- und Rettungsausstattung

id-MED Rettungstuch SRT 210SP
id-MED Rettungstuch SRT 215SP
id-MED Rettungstuch SRT 211SP
id-MED Rettungstuch SRT 211SP o.T
id-MED Evakuierungsausstattung HEA 212SP
id-MED Evakuierungsmatratze ROMA
id-MED Evakuierungsmatratze Relief
id-MED Evakuierungsmatratze Cube
id-MED NM500SP Notfallmatratze

id-MED Rutschbrett RBM 700SP
id-MED Berge- und Tragetuch BT 220 SP
id-MED Berge- und Tragetuch BT 225 SP
id-MED Berge- und Tragetuch BT 245SP
id-MED Berge-, Rettungs-, und Umbettungstuch BT 250 SP
id-MED Brandfluchthaube S-Cap
id-MED Zubehör fluoreszierender Stick

id-MED 100-35

TerraNova



Standard-Matratzen



Terra Nova Pflegebett-Standard-Matratze
zum universellen Einsatz

Kombinierbare Bezüge

A Netz-Unterbezug



B Vlies-Unterbezug



Bezug:	Netz-Unterbezug + Vlies-Unterbezug mit 1-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40–bis 120 kg
Raumgewicht:	35 kg/m ³ Polyurethan-Standardschaum
Gefertigt nach:	Öko-Tex Standard 100, zertifiziert
Gewicht:	ca. 8 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2009 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2009 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 35 11	90x190x10 cm	Polyurethan-Standardschaum	35 / 4,3 kPa	120 kg
100 35 12	90x200x10 cm	Polyurethan-Standardschaum	35 / 4,3 kPa	120 kg
100 35 13	100x200x10cm	Polyurethan-Standardschaum	35 / 4,3 kPa	120 kg

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 35 15	90x190x12 cm	Polyurethan-Standardschaum	35 / 4,3 kPa	120 kg
100 35 16	90x200x12 cm	Polyurethan-Standardschaum	35 / 4,3 kPa	120 kg
100 35 17	100x200x12 cm	Polyurethan-Standardschaum	35 / 4,3 kPa	120 kg

id-MED 100-40

schwer entflammbar



Schaumstoff-Klinikbett-Matratze incl. Jersey-Unterbezug mit 1-seitigen Reißverschluss
Klinikbett-Matratze schwer entflammbar nach DIN 597 Teil 1 + 2

Kombinierbare Bezüge

- A** Netz-Unterbezug ☐
- B** Jersey-Unterbezug ☒

Standard-Matratzen

Bezug:	Netz-Unterbezug + Jersey-Unterbezug mit 1-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40–bis 130 kg
Raumgewicht:	40 kg/m ³ Polyurethan-Standschaum, schwer entflammbar nach DIN 597 Teil 1+2
Gefertigt nach:	Öko-Tex Standard 100, zertifiziert
Gewicht:	ca. 8 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2009 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2009 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 40 21	90x190x12 cm	Polyurethan-Standschaum	40 / 4,6 hPa	130 kg
100 40 22	90x200x12 cm	Polyurethan-Standschaum	40 / 4,6 hPa	130 kg
100 40 23	100x200x12 cm	Polyurethan-Standschaum	40 / 4,6 hPa	130 kg

id-MED 100-50

Wendematratze DUO



Standard-Matratzen



Standard Wendematratze DUO zum universellen Einsatz

Kombinierbare Bezüge

Schutzbezug



Diese ca. 12 cm hohe Kaltschaummatratze steht für höchsten Komfort. Des weiteren ist die Matratze mit 2 unterschiedlichen Liegeseiten abgestimmt auf unterschiedliche Körpergewichte. Die hellgrüne Liegeseite im Härtegrad H2 ist ideal für ein Körpergewicht bis ca. 80 kg, die hellbeige Liegeseite im Härtegrad H3 ist bestens geeignet für ein Körpergewicht bis ca. 150 kg. **Diese Matratze ist auch in Sondergrößen erhältlich.**

Eigenschaften:

Zweiseitig verwendbar
Hochelastischer 2-Zonen-Polyurethan-Kaltschaum
Liegefläche 1 weich medigrün
Liegefläche 2 mittel creme

Bezug:

Netz-Unterbezug+ Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss

Patientengewicht:

45 bis 150 kg

Raumgewicht 1:

35kg/m³ Polyurethan-Kaltschaum medigrün

Raumgewicht 2:

40 kg/m³ Polyurethan-Kaltschaum creme

Gefertigt nach:

Öko-tex Standard 100, zertifiziert

Gewicht:

ca. 11,0 kg

Ersatzbezüge sind als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss, 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet

Ohne Trittkantenverstärkung

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 50 31	90x190x12 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 6 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,0 kPa 40 / 4,0 kPa	150 kg
100 50 32	90x200x12 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 6 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,0 kPa 40 / 4,0 kPa	150 kg
100 50 33	100x200x12 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 6 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,0 kPa 40 / 4,0 kPa	150 kg

Mit Trittkantenverstärkung

Eine 10 cm verstärkte Trittkante bietet erhöhte Sicherheit, auch beim mobilisieren des Patienten.

Polyurethan-Kaltschaum Raumgewicht 40 / Stauchhärte 7,2 kPa

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 50 35	90x190x12 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 6 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,0 kPa 40 / 4,0 kPa	150 kg
100 50 36	90x200x12 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 6 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,0 kPa 40 / 4,0 kPa	150 kg
100 50 37	100x200x12 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 6 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,0 kPa 40 / 4,0 kPa	150 kg

id-MED 100-70

7-Zonen-Pflegebett-Matratze




Ein hochwertiger hochelastischer 7-Zonen-Komfortschaumkern mit integrierter Wellen-Massage-Zone zur Unterstützung der nächtlichen Regeneration.

Kombinierbare Bezüge

A Netz-Unterbezug



B Jersey-Unterbezug

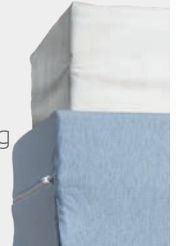

Durch die wellenförmigen Einschnitte erfüllt diese Matratze die beiden wichtigsten Anforderungen an die Dekubitus-Prophylaxe: Auf Druckentlastung abgestimmte Schulterabsenkzone mit speziellem Dämpfungsschnitt für ein optimales Einfederungsverhalten und passive Mikroklimamaregulierung, verbunden mit der integrierten Lenden-Wirbel-Stütze. Die Größe der Wellen und die tief geschnittenen Luftkanäle sind so konzipiert, dass ein effizientes Zusammenwirken von Druckentlastung und Mikroklima gegeben ist. Die Matratzenhöhe beträgt 12 cm.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Bezug Jersey mit 1-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40 bis 135 kg
Raumgewicht:	40 kg/m ³ Polyurethan-Komfortschaum
Gefertigt nach:	Öko-Tex Standard 100, zertifiziert
Gewicht:	ca. 10 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Ultra 2009 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Ultra 2009 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet

Ohne Trittkantenverstärkung

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 70 12	90x200x12 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	135 kg
100 70 14	90x200x14 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	135 kg
100 70 16	90x200x16 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	150 kg
100 70 18	90x200x18 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	150 kg
100 70 20	90x200x20 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	170 kg
100 71 16	100x200x16 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	150 kg

Mit Trittkantenverstärkung

Eine 10 cm verstärkte Trittkante bietet erhöhte Sicherheit, auch beim mobilisieren des Patienten.


Polyurethan-Komfortschaum Raumgewicht 40 / Stauchhärte 7,2 kPa

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
100 81 12	90x200x12 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	135 kg
100 81 14	90x200x14 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	135 kg
100 81 16	90x200x16 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	150 kg
100 81 18	90x200x18 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	150 kg
100 81 20	90x200x20 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	170 kg
100 82 16	100x200x16 cm	Polyurethan-Komfortschaum	40 / 4,0 kPa	150 kg



id-MED 200-10


Visko

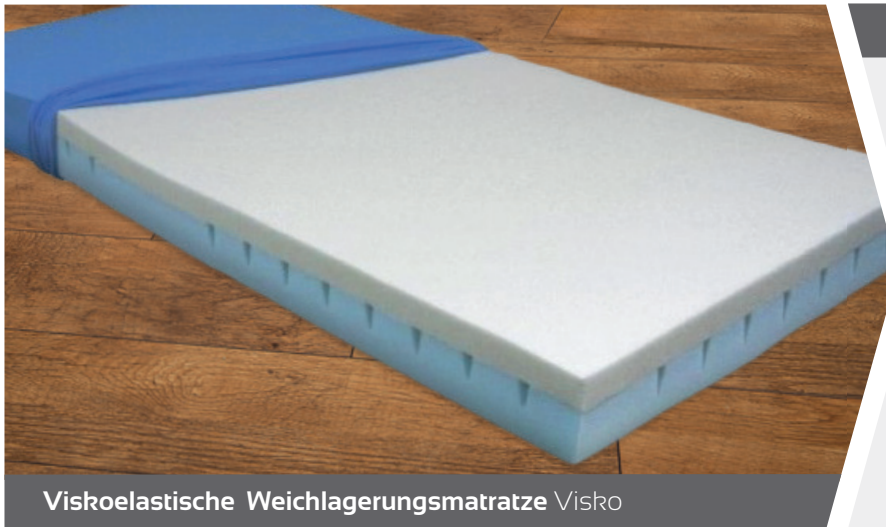

Viskoelastische Weichlagerungsmatratze Visko

Kombinierbare Bezüge

- A Netz-Unterbezug
- B Jersey-Unterbezug
- C Polyurethan-Schutzbezug

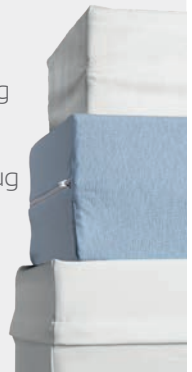

Antidekubitus-Matratzen

Komfortpflegebettmatratze zur Dekubitusprophylaxe und- therapieunterstützung bis Kategorie II (nach EPUAP) - geeignet zur Schmerztherapie, mit weicher, atmungsaktiver Würfelinnenstruktur (optimale Druckentlastung, hohe Punktelastizität), viscoelastische Liegefläche passt sich ideal der Körpertemperatur an (führt zu besserer Durchblutung des gesamten Körpers), Verstärkung des Sakralbereichs erleichtert das Sitzen im Pflegebett, inkl. Inkontinenzbezug weiß

Bezug:	Untertrikot + PU-Schutzbezug mit zweiseitigem Reißverschluss
Patientengewicht:	45 bis 140 kg
Raumgewicht 1:	50 kg/m ³ viskoelastischer Polyurethanschaum
Raumgewicht 2:	40 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert
Pflegehinweis:	kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln
Gewicht:	ca. 13,0 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigem Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004, 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 10 14	90 x 200 x 14 cm	6 cm Polyurethan-Viskoschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 4,0 kPa	140 kg

id-MED 200-20

Relief



Viskoelastische Weichlagerungsmatratze Relief

Kombinierbare Bezüge

- A Netz-Unterbezug ○
- B Jersey-Unterbezug ●
- C Polyurethan-Schutzbezug ●●



Hochwertiger Kaltschaum, im Zusammenspiel mit unserem seit Jahren bewährten Profil, bilden das Grundgerüst von Relief. Die altrosa-farbige Kaltschaumschicht überzeugt durch ihre offporige Struktur, die durch sorgfältiges, mehrfaches Cruchen entsteht. Unser Kaltschaum ist besonders atmungsaktiv, elastisch und langlebig. Viskoelastische Weichlagerungsmatratze Relief in zwei Schichten zur Anti-Dekubitus-Prophylaxe und Therapieunterstützung bis Stadium I + II. (nach Seiler)

Viskoelastischer Polyurethanschaum und Polyurethan-Kaltschaum als Stabilisierungsschaum werden durch einen 3D-Konturschnitt zusammengefügt. Somit erhöht sich der Liegekomfort des Patienten.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	45 bis 150 kg
Raumgewicht 1:	50 kg/m ³ viskoelastischer Polyurethan-Kaltschaum
Raumgewicht 2:	40 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert
Pflegehinweis:	kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln
Gewicht:	ca. 12,0 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün

Ohne Trittkantenverstärkung

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 20 51	90x190x14 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 52	90x200x14 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 53	100x200x14 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg

Mit Trittkantenverstärkung

Eine 10 cm verstärkte Trittkante bietet erhöhte Sicherheit, auch beim mobilisieren des Patienten.

Polyurethan-Komfortschaum Raumgewicht 40 / Stauchhärte 7,2 kPa

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 20 55	90x190x14 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 56	90x200x14 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg
200 20 57	100x200x14 cm	6 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 3,4 kPa	150 kg

id-MED 200-50 Cube



Dekubitusprophylaxe, Dekubitustherapie, Osteoporose, Rheuma, Rückenleiden, Schmerzpatienten

Kombinierbare Bezüge

- A** Netz-Unterbezug
○
- B** Jersey-Unterbezug
●
- C** Polyurethan-Schutzbezug
●



id-MED 200-50 Cube ist eine Superweichmatratze bestehend aus einem 3-teiligen Aufbau, die hervorragend als Anti-dekubitusmatratze zur Prophylaxe bei Patienten bis zu einem hohen Dekubitusrisiko oder bei Dekubitus 1. und 2. Grades (nach Equap / Seiler) geeignet ist. Der Einsatz der id-MED 200-50 Cube Matratze ist außerdem bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates ideal wie z. B. bei Osteoporose und rheumatischen Schmerzzuständen. Sensitive Flexcube als Herzstück der id-MED 200-50 Cube Matratze sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von superweichem Einsinken und mobilitätsfördernder Stützwirkung.

Die Matratze id-MED 200-50 Cube ist eine speziell für den Einsatz im Pflegebereich modifizierte Flexcuben-Matratzen-Variante. Mit der id-MED 200-50 Cube ist es gelungen eine hochwertige und attraktive sowie hinsichtlich der Pflegequalität funktionsoptimierte Pflegematratze zu entwickeln, die sich sehr gut an bis 4-fach verstellbare Pflegebetten anpasst. Extrem punktgenaue Körperanpassung dank spezieller Einschnitte in 3D-Würfelschnitt-Technologie wird die Oberflächenspannung aufgebrochen und die Matratze kann sich punktgenau an die Körperkontur anpassen. Herzstück sind auch hier die 252 Stück Flexcuben. Die Schwerentflammbarkeitskriterien gemäß DIN EN 597/1-2 werden erfüllt.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	45 bis 150 kg
Raumgewicht 1:	50 kg/m ³ viskoelastischer Polyurethan-Kaltschaum
Raumgewicht 2:	40 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert
Pflegehinweis:	hochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM
Gewicht:	ca. 12,0 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- hochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün


Mit Trittkantenverstärkung

Eine 10 cm verstärkte Trittkante bietet erhöhte Sicherheit, auch beim mobilisieren des Patienten.

Polyurethan-Kaltschaum Raumgewicht 40 / Stauchhärte 7,2 kPa

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 50 91	90x190x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 4,6 kPa	150 kg
200 50 92	90x200x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 4,6 kPa	150 kg
200 51 93	100x200x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa 40 / 4,6 kPa	150 kg

id-MED 200-60 Flexi-ADM

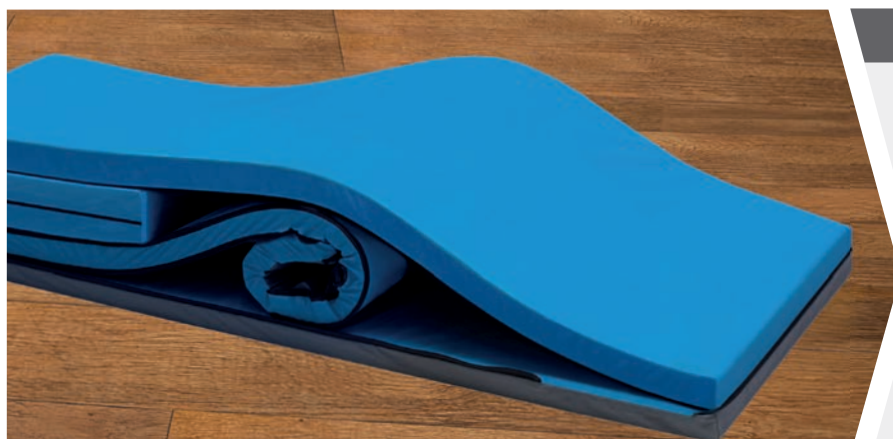

Besonders geeignet für den Einsatz zur Dekubitusprophylaxe, Dekubitustherapie, Osteoporose

Kombinierbare Bezüge

- A Netz-Unterbezug ○
- B Jersey-Unterbezug ●
- C Polyurethan-Schutzbezug ●



id-MED 200-60 Flexi-ADM wurde mit einem Palliativteam speziell für Patienten entwickelt, die kaum mehr mobilisiert werden können. Ausschlaggebend für die Entwicklung des Flexi-ADM Matratzensystems war der Wunsch, den Patienten über mehrere Stunden eine schmerzfreie Lagerung zu ermöglichen.

Die Flexi-ADM Matratze wurde aus verschiedenen Schichten und Qualitäten entwickelt für höchste Flexibilität in der Verwendung. Sie ist eine Kombination aus qualitativ hochwertiger Druckentlastung und konkurrenzlosem Komfort. Sie können damit nach den Richtlinien der Kinästetik lagern und durch Feinabstimmungen auf die individuellen Patientenbedürfnisse eingehen und anpassen.

Die Flexi-ADM Matratze bietet eine Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten, mehr als mit herkömmlichen ADM-Matratzen möglich sind. Mit wenigen Handgriffen und durch Mikrolagerungen können Lageveränderungen spielend einfach durchgeführt werden. Durch die zu öffnenden Reißverschlüsse des Mittelteiles der Matratze, kann diese auf viele unterschiedliche Arten verändert werden. Durch Rollen oder Umlegen der zweiten Schaumstoffschicht, wird dieser ermöglicht, sich an den Körper anzupassen. Durch Kombination oder Einschieben der unterschiedlich großen Flexi-ADM Keile, oder das Einrollen und/oder Einschlagen des mittleren Teiles der Matratze, können am unteren Ende z.B. eine Fersenfreilagerung, in der Mitte durch Einrollen eine bauchentspannende Lagerung oder an den Seiten z.B. eine 30° Seitenlagerung durchgeführt werden. Durch die Flexi-ADM Keile können unterschiedliche Neigungen erzielt werden, auch wenn sie zwischen der oberen oder unteren Matratzenschicht verwendet werden.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2008 mit 2-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40 bis 185 kg
Raumgewicht 1:	50 kg/m ³ viskoelastischer Polyurethan-Kaltschaum
Raumgewicht 2:	40 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert
Pflegehinweis:	kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM
Gewicht:	ca. 18,0 kg
Maß:	198x87x15 cm, Keil groß 80x32x14 cm, Keil klein 55x28x11 cm


Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2008 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2008 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100 °C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 60	90x198x55 cm	5 cm Polyurethan-Viskoschaum	50 / 4,0 kPa	185 kg
	90x198x55 cm	5 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 3,4 kPa	
	90x198x55 cm	5 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 40 kPa	
200 60 10	800x320x140/1 mm	Großer Keil	40 / 4,0 kPa	
200 60 20	550x280x110/1 mm	Kleiner Keil	40 / 4,0 kPa	

id-MED 200-70


Care

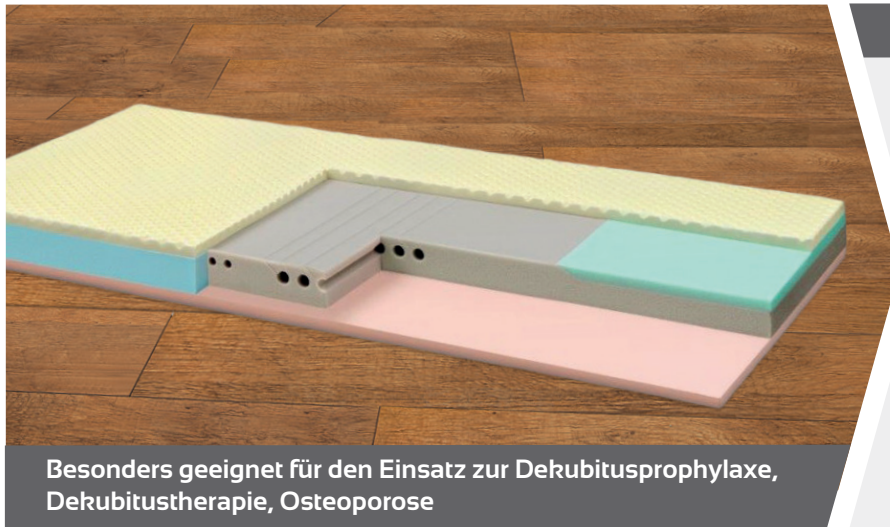

Besonders geeignet für den Einsatz zur Dekubitusprophylaxe, Dekubitustherapie, Osteoporose

Kombinierbare Bezüge

- A** Netz-Unterbezug
- B** Jersey-Unterbezug
- C** Polyurethan-Schutzbezug

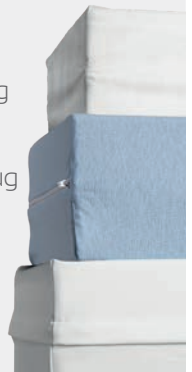

id-MED ADM Care Matratze ist ein hochwertiges, langlebiges und Druck reduzierendes Anti-Dekubitus- System, ideal für alle Pflegebereiche. Sie ist die erste Wahl in Krankenhäusern, in der Palliativpflege, in Reha- Zentren, Alten- und Pflegeheimen sowie im Homecare-Bereich.

Matratzenaufbau:

- viscoelastischer Schaum
- Kaltschaum

PU-Bezug:

- Normalschaum PU-Bezug
- Oberseite: rutschfähiger Hygienebezug blau
- Unterseite: rutschtester AntiSlip, grau verdeckter Zipp über 2 Seiten flüssigkeitsdicht
- Wasserdampfdurchlässigkeit: hohe Atmungsaktivität 800g/m² in 24h
- keimdicht gegen Bakterien, Viren und Pilze
- handelsübliche Wasch- und Wischdesinfektion

Maße:

- 200x90x15 cm

Patientengewicht:

- 40-165 kg

Optionen auf Anfrage:

- individuelle Fertigung
- Hygienebezug mit Evakuierungsausstattung

Besondere Produktmerkmale:

- geeignet für Patienten mit hohem Dekubitusrisiko (Dekubitusgrad 1-4)
- oberste Schaumstoffschicht aus viscoelastischem Schaum
- Kappnoppenschnitt zur Reduzierung des Spitzendrucks optimale Druckverteilung
- Querschnitte in der Mittelschicht für erhöhte Anpassungsfähigkeit im Schulter- und Beckenbereich sowie zur besseren Durchlüftung
- Druck reduzierender Schaumstoff im Fersen- und Wadenbereich
- Randzonenverstärkung für erleichtertes Aufstehen und Querbett sitzen
- stabilisierender Unterbau
- flexible Anpassung an jedes Pflegebett
- leichte Reinigung (Bezug wasch- und abwischbar)
- für Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
200 70	90x200x15 cm	5 cm Polyurethan-Viskoschaum	50 / 4,0 kPa	165 kg
		5 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,3 kPa	
		5cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 40 kPa	

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2008 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2008 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau

id-MED 300-10 XXL adipös



Viskoelastische Anti-Dekubitus-Schwerlastmatratze XXL adipös in zwei Schichten zur Prophylaxe- und Therapieunterstützung bei mittlerem bis hohem Risiko.

Kombinierbare Bezüge

- A Netz-Unterbezug
- B Jersey-Unterbezug
- C Polyurethan-Schutzbezug



Kombination aus hochwertigen viskoelastischem Polyurethan-Kaltschaum als Liegefläche und Polyurethan-Kaltschaum als Stabilisierungsschaum. Raumgewicht und Stauchhärte der Matratze sind für den Einsatz in der Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie abgestimmt.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	130 bis 270 kg
Raumgewicht 1:	50 kg/m ³ viskoelastischer Polyurethan-Kaltschaum
Raumgewicht 2:	40 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert
Pflegehinweis:	hochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig,
DGHM:	Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln
Gewicht:	ca. 24,0 kg

Ersatzbezüge sind als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- hochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar, nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün

Ohne Trittkantenverstärkung

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
300 10 81	90x200x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg
300 10 82	100x200x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg
300 10 83	120x200x17 cm	8 cm Polyurethan-Kaltschaum 9 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg
300 10 84	140x200x17 cm	8 cm Polyurethan-Kaltschaum 9 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg

Mit Trittkantenverstärkung

Eine 10 cm verstärkte Trittkante bietet erhöhte Sicherheit, auch beim mobilisieren des Patienten.
Polyurethan-Kaltschaum Raumgewicht 40 / Stauchhärte 7,2 kPa

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
300 10 85	90x200x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg
300 10 86	100x200x15 cm	7 cm Polyurethan-Kaltschaum 8 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg
300 10 87	120x200x17 cm	8 cm Polyurethan-Kaltschaum 9 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg
300 10 88	140x200x17 cm	8 cm Polyurethan-Kaltschaum 9 cm Polyurethan-Kaltschaum	50 / 2,4 kPa 40 / 4,6 kPa	130 bis 270 kg

id-MED ortho 400-10

Wellensegment



Orthopädische 7-Zonen-Kaltschaum-Wellen-Matratze

Kombinierbare Bezüge

- A Netz-Unterbezug ☐
- B Jersey-Unterbezug ☒
- C Polyurethan-Schutzbezug ☒
- D Doppeltuch Touch of Silver ☐



Die id-med ortho 400-10 Wellensegment ist eine 7-Zonen-Kaltschaum-Wellen-Matratze. Sie ist in sieben Körperzonen eingeteilt und passt sich mit ihren wellenförmigen Segmenten bestens an Ihren schlafenden Körper an.

Kopfzone: Die Kopfzone soll unangenehmen Verspannungen im Nackenbereich vorbeugen.

Schulterzone: Die Schulterzone ermöglicht der Schulter ein stärkeres Einsinken in die Matratzen, was vor allem bei Seitenschläfern wichtig für eine gute Lagerung der Wirbelsäule ist.

Lordosenzone: Als Lordose bezeichnet man einen in Richtung Bauch gebogenen Teil der Wirbelsäule, was im Lendenbereich normal ist. Diese Zone stützt die natürliche Haltung der Wirbelsäule in diesem Bereich.

Beckenzone: Die Beckenzone ist der Schulterzone ähnlich, sie ermöglicht dem Beckenbereich ein stärkeres Einsinken in die Matratze, sodass die Wirbelsäule ideal entlastet werden kann.

Oberschenkelzone, Wadenzone, Fußzone: Die Füße sorgen meist für einen recht punktuellen Druck auf die Matratze, der von dieser Zone abgefedert wird.

Durch den symmetrisch eingeteilten 7-Zonen-Schnitt, ist die Matratze beliebig dreh- und wendbar. Sie sollte ca. alle 6 Monate gewendet werden, um einen optimalen Schlafkomfort beizubehalten.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40 bis 135 kg
Raumgewicht:	44 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Stauchhärte:	4,0 kPa
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 100 % PES mit einseitiger Polyurethan Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochofest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächenendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
400 10 41	90x190x16 cm	Polyurethan-Kaltschaum	45 / 4,0 kPa	135 kg
400 10 42	90x200x16 cm	Polyurethan-Kaltschaum	45 / 4,0 kPa	135 kg
400 10 43	100x200x16 cm	Polyurethan-Kaltschaum	45 / 4,0 kPa	135 kg

id-MED ortho 400-20

Quadrosegment



Orthopädische 7-Zonen-Kaltschaum-Würfel-Matratze

Kombinierbare Bezüge

- A Netz-Unterbezug ☐
- B Jersey-Unterbezug ☐
- C Polyurethan-Schutzbezug ☐
- D Doppeltuch Touch of Silver ☐



Die id-med orth 400-20 Würfel-Matratze wurde von Experten für vitalen und regenerierenden Schlaf entwickelt, die entlastende Oberflächensegmentierung bietet entspanntes Liegen. Extrem punktgenaue Körperanpassung dank spezieller Einschnitte in 3D-Würfelschnitt-Technologie wird die Oberflächenspannung aufgebrochen und die Matratze kann sich punktgenau an die Körperkontur anpassen. Herzstück sind auch hier die 252 Stück Flexcuben. Ergonomische Anpassung in die Schulterkomfortzone und Lendenwirbelstütze. Die Matratze garantiert Ihnen viele Jahre lang gesunden Schlaf und ein hohes Wellness-Niveau.

Kopfzone: Die Kopfzone soll unangenehmen Verspannungen im Nackenbereich vorbeugen.

Schulterzone: Die Schulterzone ermöglicht der Schulter ein stärkeres Einsinken in die Matratzen, was vor allem bei Seitenschläfern wichtig für eine gute Lagerung der Wirbelsäule ist.

Lordosenzone: Als Lordose bezeichnet man einen in Richtung Bauch gebogenen Teil der Wirbelsäule, was im Lendenbereich normal ist. Diese Zone stützt die natürliche Haltung der Wirbelsäule in diesem Bereich.

Beckenzone: Die Beckenzone ist der Schulterzone ähnlich, sie ermöglicht dem Beckenbereich ein stärkeres Einsinken in die Matratze, sodass die Wirbelsäule ideal entlastet werden kann.

Oberschenkelzone, Wadenzone, Fußzone: Die Füße sorgen meist für einen recht punktuellen Druck auf die Matratze, der von dieser Zone abgefedert wird.

Der Doppeltuchbezug mit versteppter Klimawatte ist atmungsaktiv und garantiert eine angenehm kuschelige Oberflächentemperatur beim Schlafen.

Bezug:	Unterbezug-Netz + Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40 bis 135 kg
Raumgewicht:	50 kg/m ³ Polyurethan-Kaltschaum
Stauchhärte:	4,0 kPa
Gefertigt nach:	Öko-tex Standard 100, zertifiziert

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
400 20 96	90x190x18 cm	Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa	135 kg
400 20 97	90x200x18 cm	Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa	135 kg
400 20 98	100x200x18 cm	Polyurethan-Kaltschaum	50 / 4,0 kPa	135 kg

id-MED 500-10

Viskoauflage medium



Orthopädischer viskoelastischer - Schaumstoff als Matratzenauflage mit punktgenauer Körperanpassung.

Die Auflage kann unter einem Schutzbezug, auf einem Schutzbezug oder einfach auf der normalen Matratze liegen.

Vorteile:

- sehr leicht optimale Druckentlastung
- größtmöglicher Liegekomfort
- zur Dekubitusprophylaxe
- verhindert lokale Druckspitzen
- lindert das Schmerzempfinden
- dient der optimalen Druckentlastung
- ideal bei sporadischen Rückenproblemen
- einfache, schnelle Handhabung
- Die thermoelastische Visko - Auflage bietet einen unübertroffenen Liegekomfort.
- Durch die Visko-Auflage wird eine optimale Durchblutung und Schlafqualität und eine hervorragende Ausrichtung und Stützung der Wirbelsäule erreicht.

Bezug:	Netz-Unterbezug + Vlies-Unterbezug mit 1-seitigen Reißverschluss
Patientengewicht:	40–bis 120 kg
Raumgewicht:	50 kg/m ³ viskoelastischer Schaumstoff
Gefertigt nach:	Öko-Tex Standard 100, zertifiziert
Pflegehinweis:	hochfest bis 95 °C
Gewicht:	ca. 10 kg

Ersatzbezüge als Sonderzubehör erhältlich:

- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 mit 2-seitigen Reißverschluss
- Matratzenschutzbezug Trend Plus 2004 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung
- Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN
- Virendicht- und bakteriendicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei,
- hochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, DGHM - Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizierbar,
- nicht mangeln, dampfsterilisierbar bei 105 °C,
- schwer entflammbar nach Crib 5
- Gute Hautverträglichkeit
- Allergiker geeignet
- Farbe: blau, medigrün

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
500 10 40	90x190x4 cm	viskoelastischer Schaumstoff	50 / 3,3 kPa	120 kg
500 10 41	90x200x4 cm	viskoelastischer Schaumstoff	50 / 3,3 kPa	120 kg
500 10 42	100x200x4 cm	viskoelastischer Schaumstoff	50 / 3,3 kPa	120 kg

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
500 10 70	90x190x7 cm	viskoelastischer Schaumstoff	50 / 3,3 kPa	120 kg
500 10 71	90x200x7 cm	viskoelastischer Schaumstoff	50 / 3,3 kPa	120 kg
500 10 72	100x200x7 cm	viskoelastischer Schaumstoff	50 / 3,3 kPa	120 kg

id-MED Patja 600-00



Einsatzgebiet

Die Matratze ist besonders geeignet zur Verwendung bei Time-out Situationen und wenn vandalensicheres Material erforderlich ist, wie in Isolationszellen, Gefängnissen usw.

Zusammensetzung Kern

Der Kern besteht aus hochwertigem feuerbeständigem Schaum und erfüllt die Vorschriften und Anforderungen der Feuernorm

BS 5852 Teil 2, Crib 5.

Bezug:

Der Bezug besteht aus einem Polyestergewebe beschichtet mit Neopren und Hypalon.

Der Bezug ist doppelt genäht mit einem speziellen Garn, sodass er komplett geschlossen ist.

IQQo flüssigkeitsdicht, feuerhemmend, äußerst gute Zug- und Reißfestigkeit und daher geeignet für extrem schweren Gebrauch.

Gefertigt nach:

BS 5852 Teil 2, Crib 5.

Pflegehinweis:

Der Bezug kann einfach mit pH-neutralen Waschmitteln wischdesinfiziert werden. Wischdesinfektion nach RKI.

Die Verwendung von aggressiven Schwämmen und/oder anderen aggressiven Stoffen wird nicht empfohlen.

Gewicht:

a. 16,0 kg

Produktnutzen:

- Feuerbeständig
- Flüssigkeitsdichter Bezug
- Der doppelt genähte Bezug in Kombination mit dem flammwidrigen Kern resultiert in einer vandalensicheren, dauerbeständigen Matratze
- 3 Farben = 3 Beanspruchungsgrade
 - petrol = Standard intensive Nutzung
 - sand = Strong strapaziöse Nutzung
 - steingrau = extra Strong extrem strapaziöse Nutzung

Patja Standard

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
600 100	80x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg
600 120	90x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg
600 130	90x200x20cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg

Patja Strong

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
600 140	80x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg
600 160	90x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg
600 170	90x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg

Patja extra Strong

Art.Nr.:	Abmessung	Material	Raumgewicht	Körpergewicht
600 180	80x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg
600 200	90x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg
600 210	90x200x12 cm	12 cm Polyurethan-Kaltschaum	40 / 4,6 kPa	150 kg

id-MED 107 00 15

Sturzmatte



Bettvorlegematte zur Prophylaxe vor Sturzverletzungen für extrem unruhige Patienten.

Art.Nr.: 107 00 15

- Einfach vor dem Bett zu positionieren
- Doppelmatte, einseitig in Keilform, zur Vorbeugung vor dem „Herausrollen“ nach einem Sturz aus dem Bett
- Hochwertiger PU-Schaumstoff
- Hochwertiger Kunstlederbezug „Sky“, weiß, einfach durch Wischdesinfizierung zu reinigen
- Durch mittige Unterteilung einfach zusammenlegbar

Material:	PU-Schaumstoff / Kunstlederbezug „Sky“
Abmessungen in cm:	L: 180 cm , B: 2 x 40 cm , H: 6 cm
Eigengewicht:	8,0 kg
Reinigung:	Wischdesinfizierung
Einsatzgebiet:	Bettvorlege-Matte für extrem unruhige Patienten

id-MED 107 00 10

Seitengitterpolsterung

CE



Seitengitterpolster für Pflege- und Krankenbetten

Art.Nr.: 107 00 10

- Zum Schutz vor Verletzungen bei unruhigen Patienten
- Hochwertiges Sky-Leder, weiß, mit integrierter Schaumstoffmatte
- Fixierbar mit durchgehendem Klettverschluss
- 190 cm x 75 cm
- Wischdesinfizierbar

Material:	PU-Schaumstoff / Kunstlederbezug „Sky“ weiß
Abmessungen in cm:	190 cm x 75 cm
Reinigung:	Wischdesinfizierung



Seitengitter geteilt

Material:	PU-Schaumstoff / Kunstlederbezug „Sky“ weiß
Abmessungen in cm:	95 cm x 37,5 cm
Reinigung:	Wischdesinfizierung

Sturzprophylaxe



id-MED Matratzenschutzbezüge

Trend Plus 2004

ArtNr.: 820000

Matratzenschutzbezug 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung

Gewicht: ca. 165 g/m²
Pflege: 95°C kochfest, 100°C Tumbler beständig, chemische Reinigung, wischdes infizierbar Virendicht- und bakteriendicht, PVC frei, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, keine Faltenbildung, Crib5
Farben: weiß, creme, blau, medigrün, schwarz



Trend Ultra 2009

ArtNr.: 820010

Matratzenschutzhaube 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung

Gewicht: ca. 125 g/m²
Pflege: 95°C kochfest, 100°C Tumbler beständig, chemische Reinigung, wischdes infizierbar Virendicht- und bakteriendicht, PVC frei, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, keine Faltenbildung, Crib5
Farben: weiß, blau, medigrün



Trend Ultra 2008

ArtNr.: 820020

Matratzenschutzhaube 100 % PES mit einseitiger PU Beschichtung

Gewicht: ca. 220 g/m²
Pflege: 95°C kochfest, 100°C Tumbler beständig, chemische Reinigung, wischdes infizierbar Virendicht- und bakteriendicht, PVC frei, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, keine Faltenbildung, Crib5
Farben: königsblau, creme



Trend Somnus

ArtNr.: 820025

Matratzenschutzbezug PES/PA Microfaser geprägt, Reißverschlüsse milbendicht hinterlegt - VITALINEN 2060 - Reißverschlüsse

Gewicht: ca. 100 g/m²
Pflege: 95°C kochfest, 100°C Tumbler beständig, chemische Reinigung, Chlorbleiche, bügeln, Milbendicht, ohne chemische Zusatzstoffe, kein Nässestau, kein Schwitzen, für Babys geeignet, Matratzenhülle mit 2-seitigem Reißverschluss
Farben: weiß



cefateXKlinik

ArtNr.: 820035

Matratzenschutzhauben - Wasserdampfdurchlässigkeit: 1.260/qm/24 Std.

Gewirk: aus PU-beschichteten Gewebe, frei von PVC, Latex & Silikon, mit 2 Einstecktaschen und 2 Spanngummizügen, Atmungsaktiv, weich, hautfreundlich, dicht gegen Bakterien, Keime, Viren
Gewicht: ca. 165 g/m²
Pflege: kochfest bis 95°C, 100°C Tumbler beständig, VDK-Kammer bis 105°C, dampfsterilisierbar, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette
Farben: weiß, creme, blau, medigrün, schwarz



id-MED Matratzenschutz

Trend Plus 2004

Artikel Nr.: 0820001

Trend Plus 2004 farbiger PU-Schutzbezug verwenden wir vorrangig für unsere Kissen, Matratzen- und Einziehdeckenschutzbezüge. Reinigung und Desinfektion der Schutzbezüge vor einem Wiedereinsatz bzw. bei Patientenwechsel entsprechend den unter Aufbereitung/Wartung angegebenen Daten.

Eine reinigende Wischdesinfektion des Schutzbezugs mit einem mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel getränkten Tuch reicht in der täglichen Aufbereitung ohne Patientenwechsel zur Beseitigung sichtbarer Verschmutzungen bei Patientenwechsel und normaler Verschmutzung aus.

Bei der Desinfektion ist der Schutzbezug visuell auf Beschädigungen und Durchfeuchtung zu prüfen.

Defekte Schutzbezüge sind gemäß MPBetreibV zu entsorgen!

PU Schutzbezüge


Eigenschaften:

- einfache Desinfektion: sprüh desinfizierbar
- abwaschbar
- Öko-Tex 100 zertifiziert
- hautsympathisch & atmungsaktiv nach ASTM 96-66
- wasser-, blut- & urinundurchlässig nach ISO 1420
- milben-, viren- & bakteriendicht
- Wirkt druckentlastend und verringert die Staubemission
- Stabil und haltbar Flächengewicht 165 g/m²
- Antimikrobiell ausgestattet
- flammenhemmend Crib5
- kochfest bis 95°C – 100°C Tumbler beständig

Material:	Oberseite: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester
Gewicht:	165g/m ² .
Farbe:	weiß, creme, blau, medigrün, schwarz

Pflegehinweis:

Für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

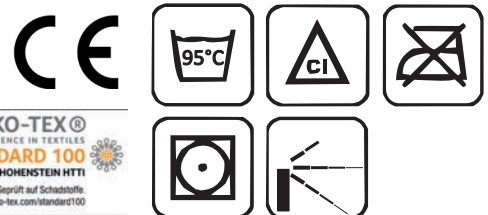

PU Schutzbezüge

id-MED Matratzenschutz

Trend Ultra 2009

Artikel Nr.: 0820010

Trend Ultra 2009 weißer PU-Schutzbezug verwenden wir vorrangig für unsere Kissen, Matratzen- und Einziehdeckenschutzbezüge. Reinigung und Desinfektion der Schutzbezüge vor einem Wiedereinsatz bzw. bei Patientenwechsel entsprechend den unter Aufbereitung/Wartung angegebenen Daten.

Eine reinigende Wischdesinfektion des Schutzbezugs mit einem mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel getränkten Tuch reicht in der täglichen Aufbereitung ohne Patientenwechsel zur Beseitigung sichtbarer Verschmutzungen bei Patientenwechsel und normaler Verschmutzung aus.

Bei der Desinfektion ist der Schutzbezug visuell auf Beschädigungen und Durchfeuchtung zu prüfen.

Defekte Schutzbezüge sind gemäß MPBetreibV zu entsorgen!


Eigenschaften:

- einfache Desinfektion: sprüh desinfizierbar
- abwaschbar
- Öko-Tex 100 zertifiziert
- hautsympathisch & atmungsaktiv nach ASTM 96-66
- wasser-, blut- & urinundurchlässig nach ISO 1420
- milben-, viren- & bakteriendicht
- Wirkt druckentlastend und verringert die Staubemission
- Stabil und haltbar Flächengewicht 125 g/m²
- Antimikrobiell ausgestattet
- flammenhemmend Crib5
- kochfest bis 95°C – 100°C Tumbler beständig

Material:	Oberseite: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester
Gewicht:	125g/m ²
Farbe:	weiß, blau, medigrün

Pflegehinweis:

Für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

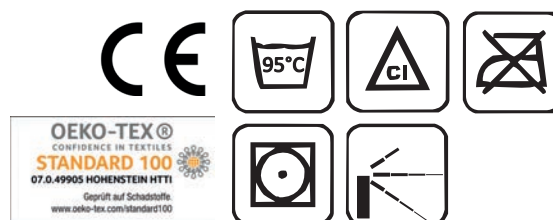

id-MED Matratzenschutz

Trend Ultra 2008

Art.Nr.: 0820025

Trend Ultra 2008 farbiger PU-Schutzbezug verwenden wir vorrangig für unsere Kissen, Matratzen- und Einziehideckenschutzbezüge.

Reinigung und Desinfektion der Schutzbezüge vor einem Wiedereinsatz bzw. bei Patientenwechsel entsprechend den unter Aufbereitung/Wartung angegebenen Daten. Eine reinigende Wischdesinfektion des Schutzbezugs mit einem mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel getränkten Tuch reicht in der täglichen Aufbereitung ohne Patientenwechsel zur Beseitigung sichtbarer Verschmutzungen bei Patientenwechsel und normaler Verschmutzung aus.

Bei der Desinfektion ist der Schutzbezug visuell auf Beschädigungen und Durchfeuchtung zu prüfen.

Defekte Schutzbezüge sind gemäß MPBetreibV zu entsorgen!

Eigenschaften:

- einfache Desinfektion: sprüh desinfizierbar
- abwaschbar
- Öko-Tex 100 zertifiziert
- hautsympathisch & atmungsaktiv nach ASTM 96-66
- wasser-, blut- & urinundurchlässig nach ISO 1420
- milben-, viren- & bakteriendicht
- Wirkt druckentlastend und verringert die Staubemission
- Stabil und haltbar Flächengewicht 220 g/m²
- Antimikrobiell ausgestattet
- flammenhemmend Crib5
- kochfest bis 95°C – 100°C Tumbler beständig

Material:	Oberseite: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester
Gewicht:	220g/m ² .
Farbe:	blau

Pflegehinweis:

Für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.



id-MED Matratzenschutz

Allergendichte Schutzbezüge



Art.Nr.: 820030

Ein revolutionäres textiles Material für Hausstauballergiker Schutzbezüge für Matratzen, Kopfkissen und Betten.

Dazu gehört nicht nur die Schutzfunktion gegen Milben und Allergene, sondern auch der wichtige Schutz gegen Schadstoffe und bedenkliche Substanzen. Mit dermatologisch einwandfrei getesteten Textilien wird gesunder Schlaf spürbar verbessert. Allergiker können damit wieder unbeschwerten Schlafkomfort genießen.

Trend Somnus ist milbensicher:

keine Beschichtung, d. h. der Bezug verursacht keine Knistergeräusche, ist sehr komfortabel, atmungsaktiv und weich, ohne Folien-Rascheln, keine chemische Behandlung, die der Gesundheit abträglich sein könnte und deren Wirksamkeit nach einigen Wäschen gemindert würde.

Trend Somnus stellt die beste natürliche Barriere gegen Milbenallergene dar und genügt höchsten Anforderungen.
- keine Basis für Pilzbildung.

Atmungsaktiv:

Trend Somnus ist atmungsaktiv, d. h. wasserdampfdurchlässig.

Das Feuchtigkeitsmanagement ist perfekt: Der von der Transpiration herstammende Wasserdampf wird absorbiert und das Material trocknet sehr schnell.


Diese sehr gute Atmungsaktivität ist auf die sehr große spezifische Oberfläche zurückzuführen. Millionen von „Mikrokanälen“ ermöglichen die Luftzirkulation.

Bei industriellen Anwendungen wie z. B. industriellen Verpackungen gestattet die Atmungsaktivität zudem, dass Lösungsmittelrückstände nicht im Material verbleiben, sondern durch Trend Somnus hindurch entweichen können.

Material:	PES / PA Microfaser
Gewicht:	ca. 100 g/m ²
Farbe:	weiß

Pflegehinweis:

: rochfest bis 100°C, 100°C Tumbler beständig, bügelbar, chemische Reinigung, Chlorbleiche möglich

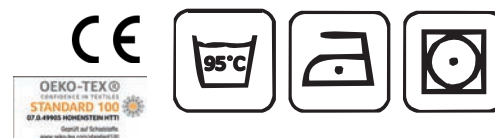





id-MED Kopfkissen

Basic Glatte Ausführung



Mit dem Basic-Programm bieten wir Ihnen Produkte in der Einsteigerklasse zu besonders wettbewerbsfähigen Preisen. Die Artikel eignen sich besonders für den kurzzeitigen Einsatz bei Einrichtungen, in denen der Preis besonders im Fokus steht. Nicht für häufige Wäsche geeignet.

Bettwaren

Bezug:	Mischgewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle 110x76
Füllung:	100 % Polyester
Raumgewicht:	ca. 22kg/m ²
Farbe:	weiß

Art. Nr.	Größe	Füllgewicht
2102911048	80x80 cm	700 g
2102921049	40x80 cm	350 g
2102931050	40x40 cm	180 g



id-MED Einziehdecke

Basic Mikrofaser



Mit dem Basic-Programm bieten wir Ihnen Produkte in der Einstiegerklasse zu besonders wettbewerbsfähigen Preisen. Die Artikel eignen sich besonders für den kurzzeitigen Einsatz bei Einrichtungen, in denen der Preis besonders im Fokus steht. Nicht für häufige Wäsche geeignet.

Steppung:	Offene Wabe
Bezug:	Mikrofaser, 100% Polyester
Füllung:	Faservlies aus 100% Polyester-Hohlfasern
Farbe:	weiß

Art. Nr.	Konstruktion	Größe	Füllgewicht	Wärmestufe
0210288 4004	Wabensteppung	135 x 200 cm	1.000g	3
0210289 4005	Wabensteppung	135 x 200 cm	1.100g	4
0210289 4435	Wabensteppung	135 x 200 cm	1.200g	4



Betwaren

id-MED Kopfkissen Soft Klimafaser

Comfort gesteppte Ausführung



Art.Nr.: 0210 212 1240

Für das SOFT Bettwarenprogramm verwenden wir ausschließlich hochwertige Faserbällchen aus eigener Fertigung. Grundlage für unsere SOFT Faserbällchen ist eine Vier-Loch-Hohlfaser aus silikonisierten, gekräuselten Polyesterfasern, die sich durch ihre Formstabilität und Langlebigkeit auszeichnet. Die hochwertige Klimafaser garantiert dabei dauerhaft ein wirklich ausgezeichnetes Schlafklima. Die Kissen mit unseren SOFT Faserbällchen sind besonders leicht und flauschig. Die Kissen werden bei der Produktion etwas fester gefüllt und sind deshalb im Neuzustand manchen Verwendern etwas zu dick. Da die Füllung beim ersten Waschen etwa 10-15% des Volumens verliert, empfiehlt sich in solchen Fällen die Kissen vor der Erstverwendung zu waschen. Faserbällchen verändern durch das Waschen und die Belastung durch den Verwender mit der Zeit etwas die Form und neigen zum Verfestigen. Die Lebensdauer eines Kissens mit Faserbällchen beträgt je nach Nutzung ca. 1 bis 2 Jahre.

Bezug: gesteppte Kissenhülle aus Spezial-Mischgewebe für den Einsatz im Objektbereich, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 110x76, weiß, Zwischenvlies

Füllung: aus Polyester, Innenseite aus Polypropylen-Vlies, Hochbauschige Klimafaser-Füllung Faserbällchen aus 100% Polyester

Pflegehinweis: Geeignet für industrielle Waschverfahren und thermische/chemothermische Desinfektion. Koch und tumblerfest.

Art. Nr.	Größe	Füllgewicht
0210 212 1240	80x80 cm	800 g
0210 212 1241	60x80 cm	600 g
0210 212 1242	50x70 cm	500 g
0210 212 1243	40x80 cm	400 g
0210 212 1244	40x40 cm	200 g



id-MED Kassettendecke Soft



Art.Nr.: O210 146 4401

Für das SOFT Bettwarenprogramm verwenden wir ausschließlich hochwertige Faserbällchen aus eigener Fertigung. Grundlage für unsere SOFT Faserbällchen ist eine Vier-Loch-Hohlfaser aus silikonisierten, gekräuselten Polyesterfasern, die sich durch ihre Formstabilität und Langlebigkeit auszeichnet. Die hochwertige Klimafaser garantiert dabei dauerhaft ein wirklich ausgezeichnetes Schlafklima. Die Kissen mit unseren SOFT Faserbällchen sind besonders leicht und flauschig. Die Kissen werden bei der Produktion etwas fester gefüllt und sind deshalb im Neuzustand manchen Verwendern etwas zu dick. Da die Füllung beim ersten Waschen etwa 10-15% des Volumens verliert, empfiehlt sich in solchen Fällen die Kissen vor der Erstverwendung zu waschen. Faserbällchen verändern durch das Waschen und die Belastung durch den Verwender mit der Zeit etwas die Form und neigen zum Verfestigen. Die Lebensdauer eines Kissens/Einziehdecke mit Faserbällchen beträgt je nach Nutzung ca. 1 bis 2 Jahre.

Bezug:	100% Baumwollen Kassettendecke mit 2,5 cm hohen Innenstegen, Biese aus Baumwolle
Füllung:	SOFT – Hochbauschige Klimafaser-Füllung Faserbällchen aus 100% Polyester

Pflegehinweis: Geeignet für industrielle Waschverfahren und thermische/chemothermische Desinfektion. Koch und tumblerfest.

Art. Nr.	Größe	Füllgewicht
O210 146 4401	135x200 cm	1100 g
O210 146 4402	135x200 cm	1300 g
O210 146 4417	155x220 cm	1360 g



id-MED Kopfkissen

Soft versteppt



Art.Nr.: 0210 212 1240

Für das SOFT® Bettwarenprogramm verwenden wir ausschließlich hochwertige Faserbällchen aus eigener Fertigung. Grundlage für unsere SOFT® Faserbällchen ist eine Vier-Loch-Hohlfaser aus silikonisierten, gekräuselten Polyesterfasern, die sich durch ihre Formstabilität und Langlebigkeit auszeichnet. Die hochwertige Klimafaser garantiert dabei dauerhaft ein wirklich ausgezeichnetes Schlafklima. Die Kissen mit unseren SOFT® Faserbällchen sind besonders leicht und flauschig. Die Kissen werden bei der Produktion etwas fester gefüllt und sind deshalb im Neuzustand manchen Verwendern etwas zu dick. Da die Füllung beim ersten Waschen etwa 10-15% des Volumens verliert, empfiehlt sich in solchen Fällen die Kissen vor der Erstverwendung zu waschen. Faserbällchen verändern durch das Waschen und die Belastung durch den Verwender mit der Zeit etwas die Form und neigen zum Verfestigen. Die Lebensdauer eines Kissens mit Faserbällchen beträgt je nach Nutzung ca. 1 bis 2 Jahre.

Bezug: 100% Baumwoll-Satin, weiß, hochfest ausgerichtet mit Microfaser versteppt
Füllung: Lavisco Pur – Schaumstoffstäbchen, 100% Polyurthan Schaumstoff, ca. 40x8x4mm, hochbauschige, Qualität, reinweiß, schwartenfrei, Raumgewicht ca. 22kg/m³³

Pflegehinweis: Geeignet für industrielle Waschverfahren und thermische/chemothermische Desinfektion. Koch und tumblerfest..

Art. Nr.	Größe	Füllgewicht
0210 212 1240	80x80 cm	800 g
0210 212 1241	60x80 cm	600 g
0210 212 1242	50x70 cm	500 g
0210 212 1243	40x80 cm	400 g
0210 212 1244	40x40 cm	200 g



id-MED Einziehdecke

Trevira CS versteppt



Art.Nr.: 2100024413

In vielen Objektbereichen wird heute die flammhemmende Ausrüstung für Bettwaren zwingend vorgeschrieben. Die Produkte für die Serie id-Med Trevira CS lassen wir mit Markengewebe von europäischen Herstellern anfertigen. Das Gewebe wird durch ebenfalls zertifizierte Füllungen ergänzt. Je nach Kundenwunsch mit Faserbällchen bzw. Faservlies aus Trevira CS oder mit flammhemmend ausgerüsteten Schaumstoff-sticks. Zur deutlichen Unterscheidung werden diese Qualitäten in hellen Pastellton eingefärbt.

Bezug: Trevira CS mit Trevira CS und PP-Vlies versteppt
Füllung: Trevira CS Faserbällchen alternativ auch mit flammhemmend ausgerüsteten PUR-Sticks

Pflegehinweis: Geeignet für industrielle Waschverfahren und thermische/chemothermische Desinfektion. Koch und tumblerfest.

Art. Nr.	Konstruktion	Größe	Füllgewicht	Wärmestufe
02100024413	MONO	135 x 200 cm	1.000g	3



id-MED Kopfkissen

Trevira CS versteppt



Art.Nr.: 2100051280

In vielen Objektbereichen wird heute die flammhemmende Ausrüstung für Bettwaren zwingend vorgeschrieben. Die Produkte für die Serie id-Med Trevira CS lassen wir mit Markengewebe von europäischen Herstellern anfertigen. Das Gewebe wird durch ebenfalls zertifizierte Füllungen ergänzt. Je nach Kundenwunsch mit Faserbällchen bzw. Faservlies aus Trevira CS oder mit flammhemmend ausgerüsteten Schaumstoff Sticks. Zur deutlichen Unterscheidung werden diese Qualitäten in hellen Pastellton eingefärbt.

Bezug: Trevira CS mit Trevira CS und PP-Vlies versteppt
Füllung: Trevira CS Faservlies, 1.000 gr.

Pflegehinweis: Geeignet für industrielle Waschverfahren und thermische/chemothermische Desinfektion. Koch und tumblerfest.

Art. Nr.	Größe	Füllgewicht
2100051280	80x80 cm	800 g
2100061281	60x80 cm	600 g
2100071282	50x70 cm	460 g
2100081236	40x80 cm	400 g





id - MEDIC[®]
indoor - Gruppe

PRODUKTKATALOG

EVAKUIERUNGSHILFEN


Sicherheits- und Rettungstuch SRT 210/215/230 SP
Berge- und Tragetuch BT 225 / BT 245/250 SP
Evakuierungsbezug/-matratze HEA 212 SP



Evakuierungs- und Rettungsausstattung


Evakuierung auf einer Ebene

Eine Pflegekraft evakuiert immer einen Patienten. Das Zimmer betreten und den Patienten kurz informieren (**z.B.: Wir haben einen Brandschaden im Haus und ich bringe Sie jetzt in Sicherheit !**). Die seitlichen Klettverschlüsse fassen und über der Bettdecke fest miteinander verbinden. Die Arme des Patienten sollen dabei lang ausgestreckt unter der Bettdecke / dem Gurt liegen.

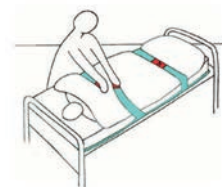


Fixieren der Patienten

Die Liegefläche auf die niedrigste Höhe bringen. Ist eine Verstellung nicht möglich (Stromausfall oder zu zeitaufwendig) wird dieser Punkt übersprungen. Das Zugband am Kopfende mit beiden Händen fassen und den Patienten mit dem Kopf zuerst seitlich von der Liegefläche ziehen (im Winkel von ca. $75^\circ < 90^\circ$). Sobald nur noch der Rumpf auf der Liegefläche liegt, gleitet das Evakuierungstuch ganz leicht auf den Boden. Der Patient ist während der ganzen Zeit durch seine Matratze geschützt.

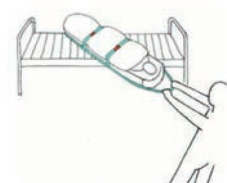

Einheit Tuch/Matratze/Patient

Das Zugband am Kopfende weiter festhalten und mit ausgestreckten Armen den Patienten mit dem Kopf voran über den Boden ziehen. Dabei wird das eigene Körpergewicht als Zugkraft mit genutzt. Der Patient sieht dabei entgegen der Zugrichtung und berührt nur mit dem Unterkörper den Boden. Vor seitlichen Berührungen mit Türkanten, Stühlen, Tischbeinen und Wänden ist der Patient durch die Matratze seitlich bestens geschützt. Auch automatisch schließende Türen können den Patienten nicht berühren.

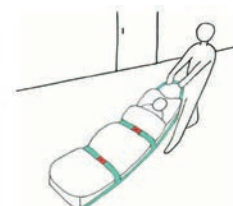

Rettung aus Gefahrenbereich

Evakuierung über eine Fluchttreppe

Die ziehende Person geht mit zügigem Schritt auf die Treppe zu und überwindet die ersten 3-4 Stufen. Sobald der Oberkörper auch über die Treppenstufen gleitet verringert sich die Auflagefläche der Matratze deutlich. Die Evakuierung geht jetzt sehr leicht vonstatten. Die ziehende Person geht die Treppe zügig herunter (nicht rennen) und kann so die Geschwindigkeit gut kontrollieren.

Aus Sicherheitsgründen sollten immer ein Abstand von 2 Metern zwischen zwei Gruppen liegen. Die evakuierten Patienten werden an einem Ort gesammelt und sind für den weiteren Transport schon vorbereitet. Über die 8 Trageschlaufen kann der Patient sofort vom Rettungsdienst übernommen werden. Sollte der erste Sammelraum außerhalb fester Gebäude liegen, so bietet das Räumungstuch zusammen mit der Matratze und der Bettwäsche einen sehr guten Schutz vor Witterungseinflüssen.



Rettung über Treppenhaus

Gebrauchsanweisung - **Rettungstuch**

SRT 210 SP / SRT 215 SP / SRT 211 SP / SRT 230SP /
HEA 212 SP / BT 220 SP / BT 225 SP BRT250SP /
BT 245SP

1. Technische Daten:

- Tragkraft 250 kg / 200 kg
- Farbe blau/ gelb, rot / gelb, blau / rot, blau / schwarz
- Abmessung: 195 x 85 cm

2. Lieferumfang:

- Rettungstuch SRT 210 SP / SRT 211SP / HEA 212SP / SRT 215SP / BT 220SP / BT 225SP / SRT 230SP / BT 245SP / BT 250SP

3. Anwendung und Platzierung:

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Rettungstuches sorgfältig durch. Das Rettungstuch SRT 210 SP / SRT 211SP / HEA 212SP / SRT 215SP / SRT 230SP wurde hauptsächlich für den Einsatz in Pflegebetten zur schnellen, sicheren und schonenden Evakuierung von nicht gehfähigen Menschen entwickelt.
- Legen sie das Rettungstuch in die Mitte des Bettes direkt auf den Bettrahmen.
- Die eingeschlagenen Gurte mit Klettband sind jeweils einem Gummiband positioniert.
- Die Gurtzugbänder sind in der Mitte des Räumungstuches zu positionieren.
- Die Matratze wird auf das Rettungstuch gelegt.

4. Rettung:

- Stellen Sie sich an die begehbare Seite vor das Bett.
- Wenn möglich, bringen Sie Kopf- und Fußteil des Bettrahmens in die Liegeposition.
- Legen Sie die Arme nach innen und betten Sie den Liegenden schützend ein.
- Ziehen Sie die zwei Gurtbänder aus der Positionierung.
- Knien sie sich auf das Bett und ziehen die gegenüberliegenden Klettbänder aus der Positionierung.
- Stellen Sie über die Querseite der Matratze eine Verbindung her.
- Ziehen Sie die Bänder nacheinander so fest wie möglich.
- Es entsteht für den Liegenden eine U-Form der Matratze.
- Die Matratze ist auf dem Rettungstuch fixiert.
- An den Zugbändern am Fuß- oder Kopfteil ziehen Sie das Rettungstuch mit der fest fixierten
- Matratze aus dem Bett über den Fußboden, durch die Tür über Treppen hinunter in eine sichere Zone.
- Wenn es die Rettungssituation erfordert, kurzfristig das Rettungstuch tragen oder ein Hindernis (nur mit Hilfe von Helfern) zu überwinden, benutzen Sie die Zugbänder am Fuß- und Kopf für das seitliche Tragen.

5. Pflege:

- Das Rettungstuch bedarf kein spezielles Waschverfahren. Gemäß der Forderung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene bzw. der Leitlinien des Robert-Koch Instituts waschbar (z.B. mindestens bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel. Eine Wischdesinfektion kann mit Propanolalkohol erfolgen. Bitte beachten sie beim Waschen und chemischer Reinigung die ISO 6330 2A, 6330 1A und ISO 3175-2
- Reinigung der Evakuierungstücher:
Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

6. Gewährleistung:

- Wir gewährleisten, dass das Rettungstuch frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist.
- Die Gewährleistung beträgt ab Rechnungslegung 1 Jahre.
- Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind oder die nach einem Einsatz, z.B. bei einem Brandfall, entstehen. Wir sind nicht für zufällige oder mittelbare Verletzung bzw. Sachschäden haftbar.

7. Sicherheitshinweis:

- Ein einmal zur Evakuierung verwendetes Rettungstuch darf nicht wieder verwendet werden! Auch ist es nicht gestattet, ein Rettungstuch vor seinem Einsatz für Übungszwecke bzw. Schulungen zu verwenden. Dazu sind gesonderte Räumungstücher zu verwenden!

8. Entsorgung:

- Für das Rettungstuch besteht keine besondere Entsorgungsvorschrift. Es kann gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Die in dieser Produktinformation enthalten Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind stand der Entwicklung, für die deren Vollständigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Die Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmt sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Rettungstuch / Evakuierungstuch

SRT 210 SP nach DIN 4102/B1



Art.Nr.: 0930031

Evakuierung auf einer Ebene und Fluchttreppe

Made in Germany

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90/100 x 200/210 cm
- Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest !)
- Sichere Fixierung des Patienten durch integrierte Sicherheitsklettverschluss
- Belastbar bis 200 kg
- Hergestellt aus einem flammhemmenden Nylon, beschichtet nach DIN EN 4102 B1
- Ausstattung mit Kopfbzugband - und Fußsteuerungsband, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Das Zugband an den Seiten dient dazu, dass damit eine Übernahme vom Rettungsdienst ohne Umlagern möglich ist
- röntgentransparent

Evakuierungs- und
Rettungsausrüstung

Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller.



Rettungstuch / Evakuierungstuch

SRT 215 SP nach DIN 4102/B1



Art.Nr.: 0930032

Evakuierung auf einer Ebene und Fluchttreppe

Made in Germany

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90/100 x 200/210 cm Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest !)
- Sichere Fixierung des Patienten durch integrierte Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Belastbar bis 200 kg
- Hergestellt aus einem flammhemmendem Nylon beschichtet nach DIN EN 4102 B1
- Ausstattung mit Kopfbzugband - und Fußsteuerungsband, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Das Zugband an den Seiten dient dazu, dass damit eine Übernahme vom Rettungsdienst ohne Umlagern möglich ist
- röntgentransparent hinzufügen

Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller.



Rettungstuch / Evakuierungstuch

SRT 230 SP mit 4 Tragegriffen nach DIN 4102 B1



Art.Nr.: 0930034

Evakuierung auf einer Ebene und Fluchttreppe

Made in Germany

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90/100 x 200/210 cm Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest!)
- Sichere Fixierung des Patienten durch integrierte Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Belastbar bis 200 kg
- Hergestellt aus einem flammhemmendem Nylon beschichtet nach DIN EN 4102 B1
- Ausstattung mit Kopfbremse - und Fußsteuerungsband, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Das Zugband an den Seiten dient dazu, dass damit eine Übernahme vom Rettungsdienst ohne Umlagern möglich ist

Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguan

Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller.



Rettungstuch / Evakuierungstuch SRT 211 SP ohne Tragegriffe



Art.Nr.: 0930045

Evakuierung auf einer Ebene und Fluchttreppe

Made in Germany

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90/100 x 200/210 cm
- Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest !)
- Sichere Fixierung des Patienten durch Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Belastbar bis 250 kg nach DIN EN 1865 Rettungsdienst
- Hergestellt aus einem flamsicheren Material nach MVSS 302
- Ausstattung mit Zugband am Kopf - und Fußende, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Nahtloses Einfügen in Ihr betriebliches Konzept, da sonst die dauerhafte Nutzung fraglich wird
- röntgentransparent
- gefertigt nach MPG

Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel und wischdesinfizierbar und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller.



Rettungstuch / Evakuierungstuch

SRT 211 SP mit 8 Tragegriffen nach DIN EN 1865



Art.Nr.: 0930041

Evakuierung auf einer Ebene und Fluchttreppe

Made in Germany

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90/100 x 200/210 cm
- Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratten
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest !)
- Sichere Fixierung des Patienten durch Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Belastbar bis 250 kg nach DIN EN 1865 Rettungsdienst
- Hergestellt aus einem flamsicheren Material nach MVSS 302
- Ausstattung mit Zugband am Kopf - und Fußende, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Mit 8 Trageschlaufen an den Seiten, damit eine Übernahme vom Rettungsdienst ohne Umlagern möglich ist
- Nahtloses Einfügen in Ihr betriebliches Konzept, da sonst die dauerhafte Nutzung fraglich wird
- röntgentransparent
- gefertigt nach MPG

Evakuierungs- und
Rettungsausrüstung

Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel und wischdesinfizierbar und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller.



id-MED Hygieneschutzbezug- mit Evakuierungsausstattung HEA 212SP



Art.Nr.: 0930050

Evakuierung auf einer Ebene und Fluchttreppe

Made in Germany

- Verbindung von Hygieneschutzbezug und Evakuierungsausstattung mit vorbeugender Sicherheit genannt die **EVAKUIERUNGSMATRATZE**
- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen 90x200x12/14 cm
- Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratzen
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Keine Beeinträchtigung der Funktionen durch vorhandene A - D Auflagen
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden (Achtung: Baumwolltücher saugen sich auf nassen Böden fest !)
- Sichere Fixierung des Patienten durch Sicherheitsgurtband mit Schnellverschluss
- Hergestellt aus einem flamsicheren Material nach MVSS 302 und DIN EN 1865
- Ausstattung mit Zugband am Kopf - und Fußende, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Der Matratzenschutzbezug besteht aus Trend Plus 2004, 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung Atmungsaktiv, Feuchtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN. Virendicht- und bakterien dicht, Blut-, Sekret- und urinundurchlässig, PVC frei, wischdesinfizierbar schwer entflammbar nach Crib 5. Gute Hautverträglichkeit, Allergiker geeignet
- Diese Evakuierungsausstattung ist mit Sicherheitsgurtband und Schnellverschluss ausgestattet
- Unser HEA 212SP ist so ausgelegt, für Personen bis zu einem Gewicht von 200 kg
- röntgentransparent

Evakuierungs- und
Rettungsausstattung

Reinigung der Evakuierungstücher:

Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel und wischdesinfizierbar und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungenkonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.



id-MED Evakuierungs-Bezug mit 7-Zonen-Pflegebett-Matratze



Art.Nr.: 1001007013

Zur schnellen Rettung

Made in Germany

4 Tragegriffe zur Übernahme durch den Rettungsdienst
Oberseite: PU / blau 220 g/m²
Unterseite: Nylon rot DIN EU 4104 B
2-seitig Reißverschluss mit 3 cm Überlappung
2 Zugurte 50 mm gelb am Kopf und Fuß
2 Sicherheitsgurtbänder und Schnellverschluß
Sicherheitsgurtband ist unter dem Boden in einen Tunnel gesteckt

- Ein hochwertiger hochelastischer 7-Zonen-Komfortschaumkern mit integrierter Wellen-Massage-Zone zur Unterstützung der nächtlichen Regeneration.
- Durch die wellenförmigen Einschnitte erfüllt diese Matratze die beiden wichtigsten Anforderungen an die Dekubitus- Prophylaxe
- Auf Druckentlastung abgestimmte Schulterabsenkzone mit speziellem Dämpfungsschnitt für ein optimales Einfederungsverhalten und erstklassig Klimaregulierung, verbunden mit der integrierten Lenden-Wirbel- Stütze.
- Die Größe der Wellen und die tief geschnittenen Luftkanäle sind so konzipiert, dass ein effizientes Zusammenwirken von Druckentlastung und Mikroklima gegeben ist.
- Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel

Patientengewicht:	40 - 135 kg
Raumgewicht:	40 kg/m ³ Polyether-Kaltschaum
Stauchhärte:	4,3 kPa
Gefertigt nach:	Öko-tex Standart 100, zertifiziert
3D Schnitt:	Welle



id-MED Evakuierungs-Bezug mit viskoelastischer Matratze Relief



Art.Nr.: 1002002054

Zur schnellen Rettung

Made in Germany

4 Tragegriffe zur Übernahme durch den Rettungsdienst

Oberseite: PU / blau 220 g/m²

Unterseite: Nylon rot DIN EU 4104 B1

2-seitig Reißverschluss mit 3 cm Überlappung

2 Zugurte 50 mm gelb am Kopf und Fuß

Sicherheitsgurtbänder gelb

Sicherheitsgurtbänder unter dem Boden in einem Tunnel gesteckt

- Viskoelastische Schaumstoffmatratze in zwei Schichten zur Dekubitus- prophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem bis hohem Risiko / Grad I + II
- Kombination aus hochwertigen Viskoschaum als Liegefläche und PU-Schaumstoff . Viskoschaum-Liegefläche als Oberschicht, PU-Schaumstoff als Stabilisierungsschaum drei Jahre Garantie auf Materialbeständigkeit.
- BMI: 11 - 41, serienmäßig
- Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel

Patientengewicht: 40 - 150 kg

Raumgewicht: 50 kg/m³³

Stauchhärte: 4,3 kPa

Gewicht: ca. 13,0 kg

3D Schnitt: Relief



id-MED Evakuierungs-Bezug mit viskoelastischer Matratze CUBE



Art.Nr.: 1002005095

Zur schnellen Rettung

Made in Germany

4 Tragegriffe zur Übernahme durch den Rettungsdienst

Oberseite: PU / blau 220 g/m²

Unterseite: Nylon rot DIN EU 4104 B1

2-seitig Reißverschluss mit 3 cm Überlappung

2 Zugurte 50 mm gelb am Kopf und Fuß

2 Sicherheitsgurtbänder gelb

Sicherheitsgurtbänder unter dem Boden in einem Tunnel gesteckt

- Viskoelastische Schaumstoffmatratze in zwei Schichten zur Dekubitus- prophylaxe und Therapieunterstützung bei mittlerem bis hohem Risiko / Grad I + II
- Kombination aus hochwertigen Viskoschaum als Liegefläche und PU-Schaumstoff . Viskoschaum- Liegefläche als Oberschicht, PU-Schaumstoff als Stabilisierungsschaum drei Jahre Garantie auf Materialbeständigkeit.
- BMI: 11 - 41, serienmäßig
- Waschbar bis 95°C mit RKI-DGHM gelistetem desinfizierendem Waschmittel

Patientengewicht:

40 - 150 kg

Raumgewicht:

80 / 20 kg/m³

Stauchhärte:

1,6 / 4,5 kPa

Gewicht:

ca. 13,0 kg

3D Schnitt:

Cube



id-MED NM500SP

Notfallmatratze

Wir lassen keinen zurück!

Ist Ihre Institution für den Ernstfall gewappnet?

In der Betriebsamkeit des Berufsalltages beschäftigen Sie sich sicherlich rudimentär mit dem Umstand, dass sich auch in Ihrer Institution ein Unfall oder eine Havarie ereignen kann. Betriebsunfälle, Brände und dergleichen sind oftmals plötzlich eintretende Katastrophen, welchen – meistens aufgrund einer unzureichenden Erstversorgung – Menschenleben zum Opfer fallen.

Die zertifizierte Entwicklung der id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP (Art.Nr.: 0930195) wird auch für Ihre Einrichtung unentbehrlich sein:



Die Ausstattung und Handhabung der id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP ist unmittelbar für den Fall nicht vorhersehbarer Unfälle und Katastrophen vorgesehen. Speziell konzipiert für den Einsatz im Gesundheitswesen, in Industrie, Bildungseinrichtungen, Behörden, Hotel- und Bürokomplexen ist die bewährte id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP längst zum anerkannten Standard in zahlreichen Institutionen geworden.

Die Schutzhülle der id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP ist mit einer Aufhängungsvorrichtung versehen, und kann daher kompakt an einem strategisch relevanten Ort an der Wand befestigt werden. Sollte sich eine akute Gefahrensituation einstellen, beispielsweise ein unkontrollierter Ausbruch eines Feuers, ist ein schnelles Handeln unabdingbar, um bewusstlose oder verletzte Personen unverzüglich in Sicherheit zu bringen.

Die id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP wurde so entwickelt, dass sie unkompliziert zu handhaben ist. Ein Unfall erfordert das prompte Einleiten sofortiger Rettungsmaßnahmen – manchmal entscheiden wenige Sekunden über Leben und Tod. Daher ist die id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP im Nu einsatzbereit – die Schutzhülle lässt sich durch einen Reißverschluss öffnen, die NM 500SP Notfall-Matratze gleitet in Folge heraus. Aufgeklappt bietet sie eine sichere und zuverlässige Unterlage – unsere NM 500SP Notfall-Matratze ist derart ausgelegt, dass Personen bis zu einem Gewicht von 200 Kilogramm transportiert werden können.

Vielmals kam die id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP in der Praxis schon zum Einsatz – in der Erstversorgung vor Ort bis hin zur Beförderung in ein Krankenhaus bietet sie optimale Voraussetzungen für den Transport, die Lagerung und Bergung verletzter Personen.

Einzelheiten zur Ausstattung der id-Medic Notfall-Matratze NM 500SP:

- Integrierte Befestigungsvorrichtung an der Schutzhülle zur Anbringung an die Wand
- Reißverschluss-Mechanismus, 2-teilig klappbar, zusammengenäht, daher platzsparend und kompakt, sofortig einsatzbereit nach dem Öffnen der Schutzhülle
- Robuste Verarbeitung, maximale Belastbarkeit 200 Kilogramm
- 8 Tragegriffe, 2 Sicherheitsgurtbänder mit Schnellverschluss, 2 Zugbänder am Kopf- und Fußende mit Schnellverschluss zum Fixieren – selbst der Transport durch Treppenhäuser kann hierdurch mühelos und sicher erfolgen

Schutzbestimmungen und Präventivmaßnahmen zur Rettung in Havariesituation sind gesetzlich vorgeschrieben. Die id-Medic Notfall-Matratze NM 50OSP leistet einen unverzichtbaren Beitrag, schnelle Hilfe zu erbringen – sie ist ein notwendiges Equipment, um Menschenleben zu retten!

Die Notfall-Matratze NM 50OSP besteht aus einem Nylon-Gewebe, Polyurethan beschichtet, Farbe rot, geprüft nach DIN 4102 B1, mit insgesamt 8 Tragegriffen und einem Kopfbefestigungsband; ebenfalls integriert – ein Fußsteuerungsband, inklusive eine 10 cm starke Schaumstoffeinlage. Die NM 50OSP Notfall-Matratze ist mit Gurtschlössern ausgestattet, um Personen bis zu 200 Kilogramm fixieren und befördern zu können.

- Maße: 170 x 50 x 10 cm (L,B,H)

Pflege:

Waschbar bis 95°C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)
Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform, Dismozon® plus oder Indicin plus. Bei einer Schlusssdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

Zögern Sie nicht, sämtliche Vorkehrungen zu treffen, um im Ernstfall gewappnet zu sein!

Made in Germany

ein Gütesiegel, das Ihnen Wertarbeit und Qualität zusichert!



id-MED Rutschbrett RBM 700SP

Evakuierung auf einer Ebene
Art.Nr.: 0930160

Das Rutschbrett RBM 700SP ist flexibel und besitzt eine sehr glatte Oberfläche, um den Reibungswiderstand auf Teppichböden zu minimieren. Es dient zum Räumen von bettlägerischen Patienten, die mit dem SRT 210SP / 211SP / HEA 212SP / SRT 215SP / SRT 230SP über Teppichboden evakuiert werden müssen. Das Rutschbrett ist einteilig und mit einer Wandbefestigung ausgestattet. Die Befestigung sollte in der Mitte des jeweiligen Brandabschnittes liegen. Die Antirutschstreifen verhindern das Wegrutschen des Rettungstuches SRT 210SP / 211SP auf dem RBM 700SP das als Unterlage dient.

Technische Daten:

Material: PVC
Brandverhalten: DIN 4102 B1
Maße: 70 x 30 cm.
Belastbarkeit: 200 kg.
Farbe: signalrot
Antirutschstreifen: signalgelb

Rutschbrett RBM 700SP

Das Rutschbrett RBM 700SP ist flexibel und besitzt eine sehr glatte Oberfläche, um den Reibungswiderstand auf Teppichböden zu minimieren. Es dient zum Räumen von bettlägerischen Patienten, die mit dem SRT 210SP/211SP über Teppichboden evakuiert werden müssen. Das Rutschbrett ist einteilig und mit einer Wandbefestigung ausgestattet. Die Befestigung sollte in der Mitte des jeweiligen Brandabschnittes liegen. Die Antirutschstreifen verhindern das Wegrutschen des Rettungstuches SRT 210SP/211SP/215SP/230SP auf dem RBM 700SP das als Unterlage dient.

id-MED Bergungs- und Tragetuch BT 225SP nach DIN 4102 B1



Art.Nr.: 0930185

Zur sicheren Rettung aus unwegsamem Gelände

Made in Germany

Zur sicheren Rettung aus unwegsamem Gelände mit unseren Bergungs- und Tragetuch BT 225SP

Wo beengte Platzverhältnisse oder unwegsames Gelände den Einsatz einer herkömmlichen Krankentrage unmöglich machen, ist das id-MED Bergungs- und Tragetuch BT 225SP eine zuverlässige und sichere Lösung für den Transport von Verletzten.

Das stabile Nylongewebe mit den umlaufend vernähten Gurtbändern garantiert eine Belastbarkeit bis zu 250 kg.

Die Oberflächenbeschichtung macht das Tuch wasserabweisend und flüssigkeitsundurchlässig.

Acht Trageschlaufen sorgen jederzeit für ausreichend Halt

Zur sicheren Aufbewahrung wird das Tragetuch mit Tasche geliefert.

Das BT 225SP erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1865 für den Rettungsdienst.

Nylon beschichtet, abwaschbar, flüssigkeitsundurchlässig, 100 % röntgentransparent,

Gewicht:	700 g
Maße:	200x 90 cm
Belastbarkeit:	250 kg
Farbe:	rot/gelb

Pflege:

Waschbar bis 95°C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform, Dismozon® plus oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.



id-MED Bergungs- und Tragetuch

BT 245 SP nach DIN 4102 B1



Art.Nr.: 0930186

Bergungs- und Tragetuch

Made in Germany

Zur sicheren Rettung aus unwegsamem Gelände mit unseren Bergungs- und Tragetuch BT 245SP. Wo beengte Platzverhältnisse oder unwegsames Gelände den Einsatz einer herkömmlichen Krankentrage unmöglich machen, ist das id-MED Bergungs- und Tragetuch BT 245SP eine zuverlässige und sichere Lösung für den Transport von Verletzten.

- stabiles Nylongewebe mit den umlaufend vernähten Gurtbändern garantiert eine Belastbarkeit bis zu 250 kg
- Oberflächenbeschichtung macht das Tuch wasserabweisend und flüssigkeitsundurchlässig
- 8 Trageschlaufen sorgen jederzeit für ausreichend Halt
- 2 fixiergurte halten die verletzte Person fest das kein verrutschen möglich ist. Die verletzte Person kann auch durch das Kopfband und Fußsteuerungsband aus dem Gefahrenbereich gezogen werden
- Zur sicheren Aufbewahrung kann das Tragetuch mit Tasche geliefert werden. Inhalt 2 Stück oder 8 Stück
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1865 für den Rettungsdienst
- Waschbar bis 95° C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Farbe:	rot/gelb
Maße:	200x 90 cm (LB)
Belastbarkeit:	250 kg
Gewicht:	700 g

Sonderzubehör:

Produktbeschreibung Rettungs-Wandbox incl. Wandhalterung:

Die Rettungsbox wird flexibel an der Wand befestigt. Beim Öffnen des Reißverschlusses gleiten die Bergungs- und Tragetücher heraus. Nur noch die Bergungs- und Tragetücher in Position bringen und der Einsatz kann beginnen.

Farbe:	rot
Maß:	ca. 40x30x10 cm (LBH)
Maß:	ca. 40x30x20 cm (LBH)

Pflege:

Waschbar bis 95°C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform, Dismozon® plus oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.



id-MED Bergungs- und Tragetuch BT 245 SP inklusive Rettungs-Box nach DIN 4102 B1



Art.Nr.: 0930186

Bergungs- und Tragetuch inklusive Rettungs-Box

Made in Germany

Ein Gebinde beinhaltet 2 oder 8 Bergungs- und Tragetücher BT 245SP + 1 Wandbox mit Halterung zur Aufnahme der Bergungs- und Tragetücher.

Zur sicheren Rettung aus unwegsamem Gelände mit unseren Bergungs- und Tragetuch BT 245SP. Wo beengte Platzverhältnisse oder unwegsames Gelände den Einsatz einer herkömmlichen Krankentrage unmöglich machen, ist das id-MED Bergungs- und Tragetuch BT 245SP eine zuverlässige und sichere Lösung für den Transport von Verletzten.

- stabiles Nylongewebe mit den umlaufend vernähten Gurtbändern garantiert eine Belastbarkeit bis zu 250 kg
- Oberflächenbeschichtung macht das Tuch wasserabweisend und flüssigkeitsundurchlässig
- 8 Trageschlaufen sorgen jederzeit für ausreichend Halt
- 2 fixierte Gurte halten die verletzte Person fest, das Verrutschen ist möglich. Die verletzte Person kann auch durch das Kopfband und Fußsteuerungsband aus dem Gefahrenbereich gezogen werden
- Zur sicheren Aufbewahrung kann das Tragetuch mit Tasche geliefert werden. Inhalt 2 Stück oder 8 Stück
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1865 für den Rettungsdienst
- Waschbar bis 95° C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Farbe: rot/gelb
Maße: 200x 90 cm (LB)
Belastbarkeit: 250 kg
Gewicht: 700 g

Produktbeschreibung Rettungs-Wandbox:

Die Rettungsbox wird flexibel an der Wand befestigt. Beim Öffnen des Reißverschlusses gleiten die Bergungs- und Tragetücher heraus. Nur noch die Bergungs- und Tragetücher in Position bringen und der Einsatz kann beginnen.

Farbe: rot
Maß: ca. 40x30x20 cm (LBH)

Pflege:

Waschbar bis 95°C und wischdesinfizierbar, thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C)

Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform, Dismozon® plus oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

titiv

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

id-MED Bergungs- und Tragetuch BT 250 SP



Zur schnellen Rettung



Art.Nr.: 930190

Made in Germany

Vom Einsatz vor Ort bis zur Versorgung im Klinikbereich ist das id-Medic BRT 250SP Bergung, Rettungs-und Umbettungstuch eine sichere und zuverlässige Unterlage. Es ist aus strapazierfähigem, röntgenstrahlendurchlässigem robustem PP-Gewebe mit 8 Eingriffen gefertigt und bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 200 kg. Durch die PE-Beschichtung ist es besonders hygienisch und verhindert den Durchlauf von Flüssigkeiten. Einsetzbar in Kliniken Notaufnahme, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie als Leichenbergetuch.

Maße: 200 x 80 cm
Verpackt: 22 x 30 x 6 cm
Gewicht: 660 g
max. Belastung: 160 kg

id-MED Brandfluchthaube S-CAP



Art.Nr.: 0940120 in der Kartonbox
Art.Nr.: 0940125 in der Wandbox

Zur schnellen Rettung

Die Fluchthaube S-CAP bietet Atemschutz gegen Rauch und Brandgase. Untersuchungen bestätigen immer wieder, dass im Falle eines Brandes die größten Gefahren nicht von Hitze oder Flammen, sondern von dem dabei entstehenden Rauch und den Brandgasen ausgehen. Besonders gefährlich ist das bei den meisten Bränden auftretende Kohlenmonoxid. S-CAP filtert die Rauch- und Brandgase aus der Atemluft und schützt.

Anwendungsgebiete:

- S-CAP wurde auch als Rettungshaube für die Feuerwehr oder andere Rettungsteams zur Evakuierung bewusstloser Personen entwickelt.
- Als Fluchthaube erhöht S-CAP die Sicherheit in Wohngebäuden, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Hotels, Versammlungsstätten oder Bürogebäuden.

id-MED Zubehör

fluoreszierender Sticker



Dreilagige cadmiumfreie Spezial-PVC-Folie mit seiden glänzender Oberfläche nach DIN 67 510. Der nachleuchtende Effekt zeichnet sich durch eine besonders hohe Anfangshelligkeit unmittelbar nach Abschaltung der anregenden Lichtquelle aus. Die Anregung kann beliebig oft erfolgen, ohne daß dadurch die Leuchteigenschaften der Folie verringert werden. Enthält keine radioaktiven Stoffe!!

Anwendungsgebiete:

- Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen im Innenbereich.

BESTELLFORMULAR

id - MEDIC[®]

indoor - Gruppe

Weststrasse 86 | 09116 Chemnitz

Telefon: 0371 | 69 46 69 2 | Telefax: 69 46 51 7

www.indoor-gruppe.de | E-Mail: info@indoor-gruppe.de

BITTE KOPIEREN SIE VOR DEM AUSFÜLLEN DAS BESTELLFORMULAR

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Menge:	Preis pro Mengeneinheit:	Gesamtwert:

Absender / Firmenanschrift:	Lieferanschrift (falls abweichend):

Kundennummer:

Telefon:

Ort, Datum

Ansprechpartner:

Telefax:

Unterschrift



PRODUKT KATALOG